

Hufschutz aus der Perspektive des Pferdes gedacht.

“Wenn ich wählen dürfte...

...würde ich OKIE's® tragen.”



“Warum ich OKIE’so® tragen würde?”



ProFlex Kern

Leicht & trotzdem stabil.



Metallfrei

Kein Verletzungsrisiko.



Unterstützung

Stoßdämpfend u. komfortabel.



Barhufgefühl!

So natürlich wie möglich.



Hufmechanismus

Die “Form” entsteht durch die Funktion.




“Warum so - und nicht anders?”

Jedes Detail folgt einer Funktion.

OKIE® ProFlex Kern

→ Das Herzstück des OKIE® Hufschutzsystems

Der speziell entwickelte Kunststoffkern verbindet Flexibilität und Stabilität genau dort, wo sie benötigt werden. Das leichte und zugleich widerstandsfähige Material unterstützt die natürliche Bewegung des Hufs, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Durch die gleichmäßige Druckverteilung bis in die hinteren Hufstrukturen kann der OKIE® ProFlex Kern echte Unterstützung bieten auch bei orthopädischen Anforderungen. Gleichzeitig lässt sich das System individuell an unterschiedlichste Hufformen anpassen und das sowohl geklebt als auch genagelt. So entsteht ein Hufschutz, der Komfort, Funktion und Belastbarkeit sinnvoll miteinander verbindet. Der ProFlex Kern ist **vollständig** mit den Klebelaschen **verschweißbar**.

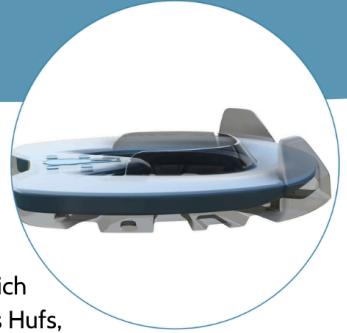

Das innovative OKIE® Profil

→ Sicherer Halt auf unterschiedlichsten Untergründen


Das speziell entwickelte Profil orientiert sich am natürlichen Gleit- u. Rutschverhalten eines Barhufs und sorgt für sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen auch bei Nässe, Schnee oder festem Boden. Die durchdachte Struktur aus Vertiefungen und Erhebungen unterstützt ein natürliches Laufgefühl und verbessert gleichzeitig die Griffigkeit des Hufschutzes. Beim OKIE® Sport ermöglichen die freiliegenden Bereiche des ProFlex Kerns zudem eine sichere Vernagelung. Für zusätzliche Traktion können bei Bedarf Spikes eingesetzt werden.



OKIE® SideGrips

→ Die integrierten Seitenaufzüge

Die fest integrierten Aufzüge schmiegen sich flexibel an die Hufwand an und sorgen für sicheren Halt, ohne abzustehen oder Druckstellen zu erzeugen. So wird ein Verdrehen oder Verrutschen des Hufschutzes effektiv reduziert, ohne das Horn unnötig zu belasten. Im Gegensatz zu starren Metallaufzügen passen sich die SideGrips den natürlichen Bewegungen des Hufs an und minimieren gleichzeitig das Risiko von Verletzungen oder Hornschäden. Bei Bedarf lassen sie sich einfach entfernen oder individuell an die jeweilige Hufsituation anpassen.

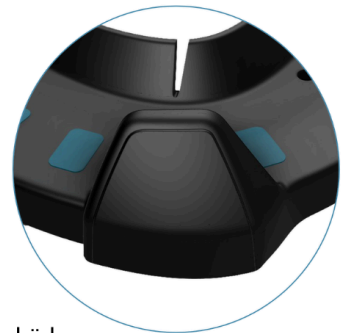

“Weil Gesundheit beim Huf beginnt.”

OKIE® Movelt-Zone

→ **Beweglichkeit, die der Funktion des Hufes folgt**

Die geschützte OKIE® Movelt-Zone wurde entwickelt, um den natürlichen Bodenkontakt des Hufstrahls gezielt zu unterstützen. Durch die spezielle Geometrie bleibt eine vertikale Bewegung der hinteren Hufstrukturen möglich, wodurch Hufmechanismus und Durchblutung aktiv gefördert werden können.


Die anpassbare Konstruktion ermöglicht zudem eine individuelle Erweiterung der Beweglichkeit sowie einen einfachen Zugang zum Strahlbereich ohne dabei auf Stabilität verzichten zu müssen. So verbindet die Movelt-Zone natürliche Funktion mit gezielter Unterstützung in einem modernen Hufschutzsystem.



OKIE® Schutzlippe

→ **Flexibler Schutz für die Hufsohle**

Die mehrteilige OKIE® Schutzlippe wurde entwickelt, um das Eindringen von Schmutz, Steinen und Schnee unter den Huf gezielt zu reduzieren. Durch die spezielle Geometrie mit zwei Entlastungskerben passt sie sich flexibel an die Form der Hufsohle an, ohne Druckstellen zu erzeugen. So entsteht ein effektiver Abschluss zur Sohle, während der natürliche Bewegungsablauf des Hufs erhalten bleibt. Bei Bedarf kann die Schutzlippe zudem individuell angepasst oder entfernt werden z. B. zur Verwendung von Keilplatten oder orthopädischen Einlagen.

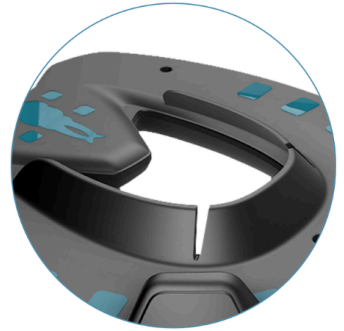

“Liesl” das Marker-Pferd

→ **Kleine Hilfe. Große Wirkung**

Die integrierte Markierung erleichtert die eindeutige Zuordnung des Hufschutzes zum jeweiligen Huf. So werden Verwechslungen zwischen rechts und links vermieden und ein schneller, sicherer Arbeitsablauf unterstützt. Die Markierung kann mit einem Stift oder auch dauerhaft haltbar eingritzelt werden.



“Ein System. Alle Möglichkeiten.”

OKIE® KlickIT Deckel

→ Clever geschützt bis ins Detail

Der innovative Sohlenschutz ergänzt das Hufschutzsystem um eine flexibel einsetzbare Komponente. Er lässt sich passgenau einklicken, sitzt sicher im Hufschutz und kann jederzeit wieder entfernt und erneut verwendet werden.

Besonders praktisch: Der KlickIT Deckel kann sowohl vor dem Anbringen des Hufschutzes als auch **nachträglich** am bereits montierten OKIE® direkt am Pferd eingesetzt oder entfernt werden. So bleibt das System jederzeit flexibel anpassbar z. B. bei empfindlichen Sohlen, winterlichen Bedingungen, Polsterungen oder zusätzlichem Schutzbedarf.



Flexible Passform

→ Entwickelt für runde und ovale Hufformen

Die besondere Geometrie des OKIE® Hufschutzsystems ermöglicht eine flexible Anpassung an Vorder- u. Hinterhufe unterschiedlichster Formen. Durch den großen Anpassungsspielraum kann derselbe OKIE® sowohl für runde als auch ovale Hufe eingesetzt werden ohne Verlust von Funktion oder Stabilität. Das reduziert den Lageraufwand, vereinfacht die individuelle Anpassung bei gleichbleibender Qualität des Hufschutzes.



Hallo, ich bin Ronja.

OKIE® Hufschutz ist nicht am Schreibtisch entstanden sondern aus echter täglicher Arbeit am Pferd. Über viele Jahre hinweg habe ich Bewegungen, Abläufe und bestehende Lösungen unerbitterlich hinterfragt und beobachtet. Ich wollte einen Hufschutz entwickeln, der die Biomechanik gezielt unterstützt und Stabilität, Schutz und Funktion sinnvoll vereint.

Ich wünsche mir, dass OKIE® Pferden und ihren Menschen den Alltag spürbar erleichtert.

**“Nicht das Pferd sollte sich anpassen.
Der Hufschutz sollte es tun!”**



Die Revolution des Hufschutzes.



Erfahre mehr über das
OKIE® Hufschutzsystem!



www.OKIE-Hufschutz.de
Anwendung • Schulungen • System • Fachinformationen